



Technoleg Glyfar, Gwnaethpwyd i Ofalu

Move

Synhwyrdd Symudiad

Canllaw
Rhaglennu V 1.0



Mae'r Move yn synhwyrdd symudiad syml a cain. Yn hawdd a syml i ddefnyddio, mae'r Move efo maes eang o weledigaeth i fonitro ystafell llawn a rhoi sicrwydd meddwl. Mae'n bosib eu gosod i wal neu gornel ystafell wrth ddefnyddio padiau gludiog neu ddefnyddio'r tyllau sgriw ar gefn y casin am osodiad mwy diogel. Mae'n bosib newydd y 2 batri AA yn hawdd drwy dynnu un sgriw.

Paratoi'r Move

Agorwch y ddyfais wrth ryddhau'r sgrïw o dan y LED. Mae'n bosib tynnu'r ddyfais o'i gilydd ac mae'r casin tu blaen yn dangos yn y daliwr batri

Troi Ymlaen

Mi fydd y Move yn troi ymlaen pan mae'r strip ynysu batri yn cael eu tynnu. Mi fydd y LED yn fflachio'r goch wedyn gwyrdd i nodi batri da, neu goch i nodi batri isel. Mi fydd y ddyfais yn cynhesu ag ar ôl 30 eiliad mi fydd yn Move yn mynd i fodd prawf cerdded am 2 funud.

Prawf Cerdded

Pan fydd yr uned yn troi ymlaen, ar ôl y 30 eiliad o gynhesu, mi fydd wedyn yn mynd i fodd prawf cerdded am 2 funud. Yn fodd prawf cerdded, mi fydd y LED yn fflachio yn goch bob tro mae symudiad yn cael eu canfod, yn ogystal â gyrru neges radio. Mi fydd yr uned yn mynd i fodd gweithrediad arferol pan fydd y prawf cerdded 2 funud yn dod i ben.

Nodyn: Ddylai'r Move cael eu rhaglennu i'r ddyfais derbyn yn ystod modd prawf cerdded.

Gweithrediad Arferol

Ar ôl i'r prawf cerdded dod i ben, mi fydd y Move yn mynd i fodd gweithrediad arferol. Pan yn y modd hwn, mi fydd neges radio yn cael eu gyrru pob tro fydd symudiad yn cael eu darganfod; ni fydd y LED yn fflachio yn ystod gweithrediad arferol. Yn ystod y gweithrediad arferol, mi fydd yn bosib darganfod symudiad yn syth, wedyn efo tua 5 eiliad o oediad darganfod cyn i fwy o symudiad cael eu darganfod.

Cysylltu'r Move i'r Notifier neu System Teleofal Arall

1. Sicrhewch fod y Move wedi troi ymlaen ag yn fodd prawf cerdded
2. Paratowch y Notifier/system arall wrth ei rhoi fewn fodd cofrestru
3. Actifadu'r Move drwy ddefnyddio symudiad o flaen y lens, mi fydd y LED yn fflachio yn goch i gadarnhau fod symudiad wedi eu darganfod
4. Mi ddylai'r Notifier/system arall cydnabod y ddyfais newydd

Nodyn: Cyfeiriwch at ganllaw defnyddiwr y system dderbyn i barhau â'r gosodiad, fel modd rhithwir.

Gosodiad

Ar gyfer gosod yn sydyn, gosod pad gludiog i gefn y casin. Pan fydd y strip ynysu batri wedi cael eu tynnu, ail osod yr uned at ei gilydd, â'i ddiogelu gan ddefnyddio'r sgrïw gadw. Rhowch bwysau ar yr uned am ychydig o eiliadau pan fydd yn eu lle.

Os bod angen sgrïwio i mewn i wal neu gornel, drilio drwy'r pedwar toriad sgrïw a defnyddiwch bedwar sgrïw addas i osod y casin cefn i'r wal, cyn ail osod yr uned at ei gilydd. Os mae'r uned wedi eu gosod y barod, mae'n bosib tynnu tu blaen yr uned o'r arwyneb osod ar gyfer unrhyw ffurfwedid.

Ar gyfer gweithrediad gorau mewn ystafell, mi ddylai mowntio'r Move mewn cornel ystafell, yn agos i'r nenfwd rhwng 2.1m i 2.3 o'r llawr.

Pwysig: Dylid cadw'r Move yn bell o ffynonellau anfwriadol o newid sydyn i gerrynt thermol fel ffenestri, drysau, gwresogyddion fan ag uwchben rheiddaduron.



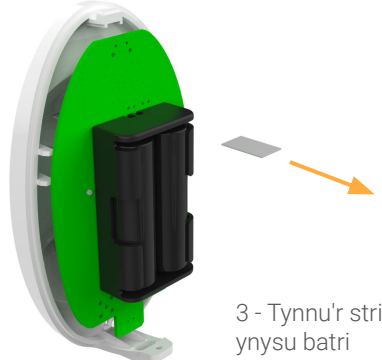

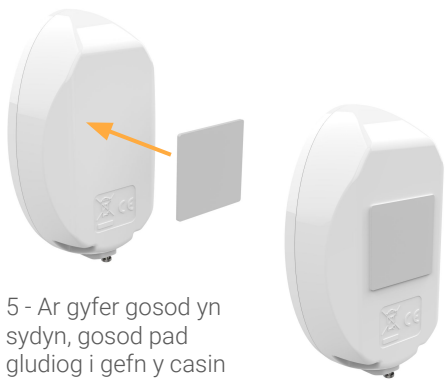




Troi i Fwrdd

Mae'n bosib troi'r ddyfais i ffwrdd wrth dynnu'r batri neu ail osod y strip ynysu batri.

Ailosod Gosodiadau Ffatri

I ailosod gosodiadau ffatri, tynnwch ag ail-fewnosod y batris.

Canllaw Mownt Gludydd

 <p>1- Dadsgrwio'r sgrw casin</p>	 <p>2 - Tynnu'r casin o'i gilydd</p>	 <p>3 - Tynnu'r strip ynysu batri</p>
 <p>4 - Ailgynull yr uned</p>	 <p>5 - Ar gyfer gosod yn sydyn, gosod pad gludiog i gefn y casin</p>	 <p>6 - Rhowch bwysau ar yr uned am ychydig o eiliadau</p>
 <p>Ar ôl pedwar eiliad mi fydd y LED yn fflachio'n goch wedyn gwyrdd i dangos batri da, neu goch i dangos batri isel</p>	 <p>Ar ôl 30 eiliad, mi fydd yn mynd i fodd prawf cerdded am 2 funud. Mi fydd yn fflachio'n goch a gyrru neges radio pan fydd symudiad yn cael eu darganfod</p>	 <p>Ar ôl 2 munud mi fydd yn mynd i weithrediad arferol. Mi fydd neges radio yn cael eu gyrru pob tro mae symudiad yn cael eu darganfod; ni fydd y LED yn fflachio</p>

Screw Mount Guide

 <p>1- Dadsgrwio'r sgrw casin</p>	 <p>2 - Tynnu'r casin o'i gilydd</p>	 <p>3 - Defnyddiwch dril i drilio drwy'r pedwar toriad sgrw</p>
 <p>4 - Defnyddiwch bedwar sgrw addas i fowntio cefn y casin i'r wal</p>	 <p>5 - Tynnu'r strip ynysu batri</p>	 <p>6 - Ailgynnull yr uned</p>
<p>Ar ôl pedwar eiliad mi fydd y LED yn fflachio'n goch wedyn gwyrdd i dangos batri da, neu goch i dangos batri isel</p> 	 <p>Ar ôl 30 eiliad, mi fydd yn mynd i fodd prawf cerdded am 2 funud. Mi fydd yn fflachio'n goch a gyrru neges radio pan fydd symudiad yn cael eu darganfod</p>	 <p>Ar ôl 2 munud mi fydd yn mynd i weithrediad arferol. Mi fydd neges radio yn cael eu gyrru pob tro mae symudiad yn cael eu darganfod; ni fydd y LED yn fflachio</p>

Manylebau

Cydnawsedd	Notifier / Tunstall
Amledd Gweithredu	869 MHz
Maint	Dyfais - H94 x L133 x D12.3mm
Batri	2 x Energizer L91 Ultimate Lithium AA
Bywyd Batri	10 blwyddyn efo 10 gweithrediad y diwrnod
ALB (Batri Isel Awto)	Profi batri bob dydd
Opsiynau Gosod	Sgriw / Gludiog
Pellter Gweithio	Hyd at 600m
Tymheredd Gweithredu	+5°C i +45°C
Cydymffurfiad	CE / RoHS 2 / RED
Gwarant	24 mis

Newid Batri

Mae o'n bwysig i ddefnyddio dau fatri 'Energizer L91 Ultimate Lithium AA' (M115-100) i sicrhau bywyd batri uchel a rhybuddion batri isel cywir. Nodwch y marciau o fewn yr ardal batris i sicrhau eu bod wedi eu gosod yn gywir.

Pacio

Mi ddylai offer sy'n cynnwys celloedd neu fatris cael ei phacio mewn pecyn cryf, anhyblyg a rhoi yn i le yn ofalus i sicrhau dim symudiad o fewn y pecyn i osgoi actifadu damweiniol. Rhaid i enw a chyfeiriad yr anfonwr fod yn weladwy yn glir ar y pecyn allanol.

Gwaredu

Dylid cael gwaredu ar yr holl wastraff electronig yn unol â'r ddeddfwriaeth ddiweddaraf.

Rhaid ei waredu o fewn y llif gwastraff trydanol ac electronig a pheidio â chael gwaredu arno yn y llif gwastraff arferol. Mae ailgylchu cynhyrchion gwastraff trydanol yn helpu i warchod adnoddau naturiol ac atal effeithiau andwyol ar yr amgylchedd.

Cysylltwch â'ch cyflenwr os bydd angen mwy o wybodaeth arnoch.

Datganiad Cydymffurfiaeth:

Trwy hyn, mae Cair (UK) Ltd yn datgan bod y math o offer radio, Move yn cydymffurfio â Chyfarwyddeb 2014/53/EU

