



Technoleg Glyfar,
Gwnaethpwyd i Ofalu



Canllaw Cyfeirio Cyflym Connect

we-cair.com

[Cynnwys

- Tudalen 3 - Troi Ymlaen / I Ffwrdd
- Tudalen 4 - Rhaglennu'r Moddau / Opsiynau
- Tudalen 5 - Moddau/Opsiynau
- Tudalen 6 - Oedi Absenoldeb
- Tudalen 7 - Cysylltu'r Connect i'r Notifier / System Arall




Connect

Troi Ymlaen / I Ffwrdd

I droi ymlaen, pwyswch a dal y switsh allanol. Bydd y dangosydd LED yn fflachio coch a gwyrdd ac yna'n cynhyrchu tŷn uchel-draw yna fflach lliw gwyrdd byr sy'n cadarnhau ei fod ymlaen. Nawr rhyddhewch y switsh.

I ddiffodd, pwyswch a dal y switsh allanol. Bydd y dangosydd LED yn fflachio coch a gwyrdd ac yna'n cynhyrchu tŷn isel-draw ac yna fflach lliw coch byr sy'n cadarnhau ei fod i ffwrdd. Nawr rhyddhewch y switsh.

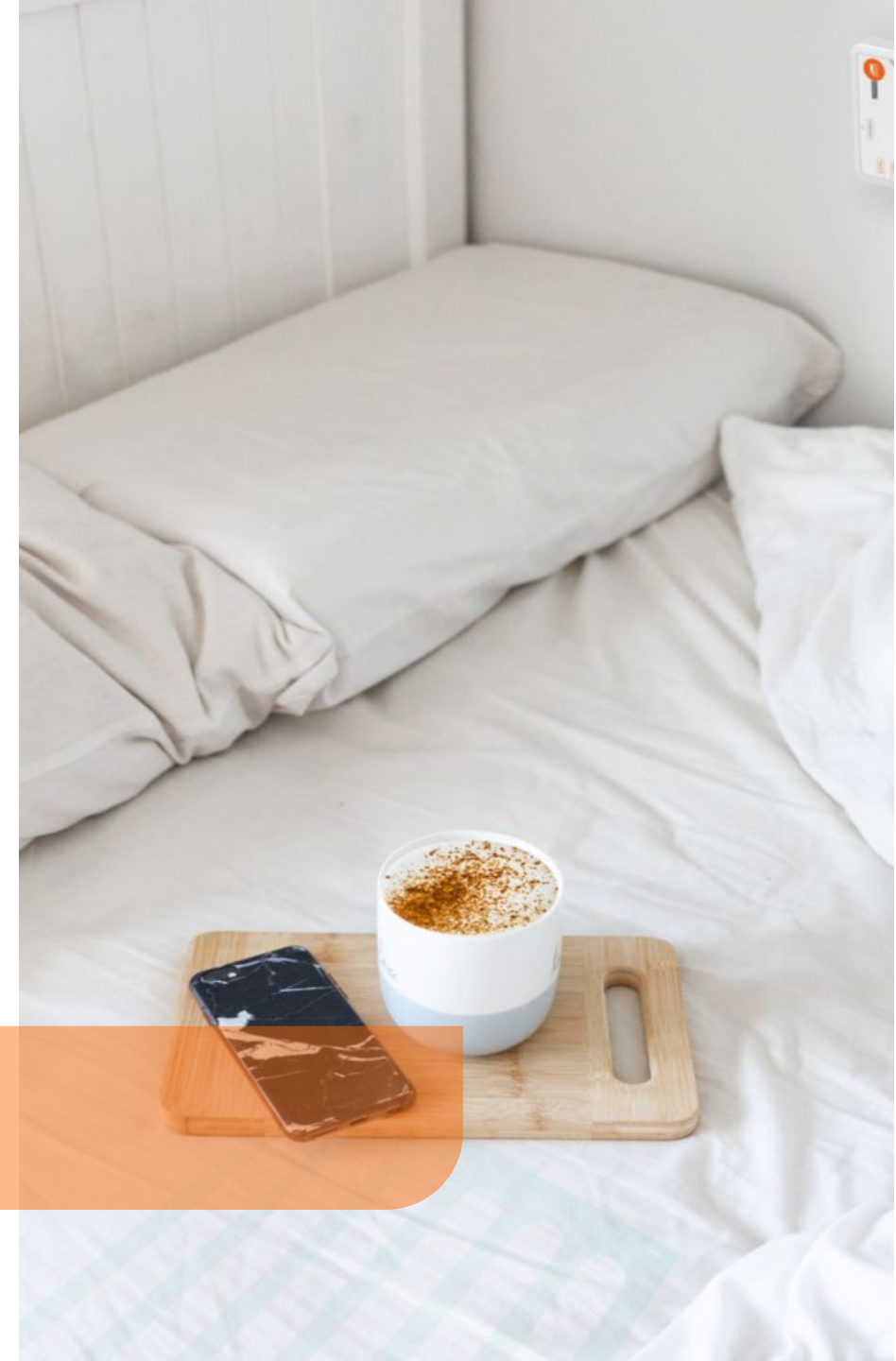

Technoleg Glyfar,
Gwnaethpwyd i Ofalu

Connect

Rhaglennu'r Moddau / Opsiynau

I raglennu'r moddau/opsiynau (sydd i'w weld ar y dudalen nesaf), defnyddiwch y dull canlynol:


- Trowch y deial i'r gosodiad a ddymunir
- Pwyswch a dal i lawr y swîts mewnol am tua 2 eiliad efo offer addas nes bod LED 2 yn newid lliw a chlywir sŵn (tua 2 eiliad)
- Rhyddhewch y swîts mewnol. Mi fydd LED 2 a'r seinydd yn fflachio/bipio i gadarnhau'r rhif modd/opsiwn sydd wedi cael eu dewis. Nodwch fydd yna gam ychwanegol pan fydd yn defnyddio moddau 3 a 4, gweler y canllaw rhaglennu Connect am fwy o fanylion
- Ailadroddwch gamau 1-3 am foddau/opsiynau arall
- Os yr ydych yn defnyddio moddau 1-4, gosodwch y deial i'r oedi absenoldeb sydd wedi eu disgrifio isod. Nid oes angen pwysu'r swîts mewnol i osod yr oedi absenoldeb



Connect

Moddau/Opsiynau

- Rhif 0. Modd Sbardun Personol
- Rhif 1. Modd Absenoldeb Gwely/Cadair
- Rhif 2. Modd Rhithiol Gwely/Cadair
- Rhif 3. Modd Synhwyrdd Gadael Eiddo
- Rhif 4. Modd Drws Rhithiol
- Rhif 5. Modd Mat Pwysau
- Rhif 6. Modd Synhwyrdd Epilepsi
- Rhif 7. Modd Synhwyrdd Enwresis
- Rhif 8. Opsiwn Sain
- Rhif 9. Opsiwn Swîts Allanol. (Mae'r swîts wedi eu galluogi'n ddiofyn)

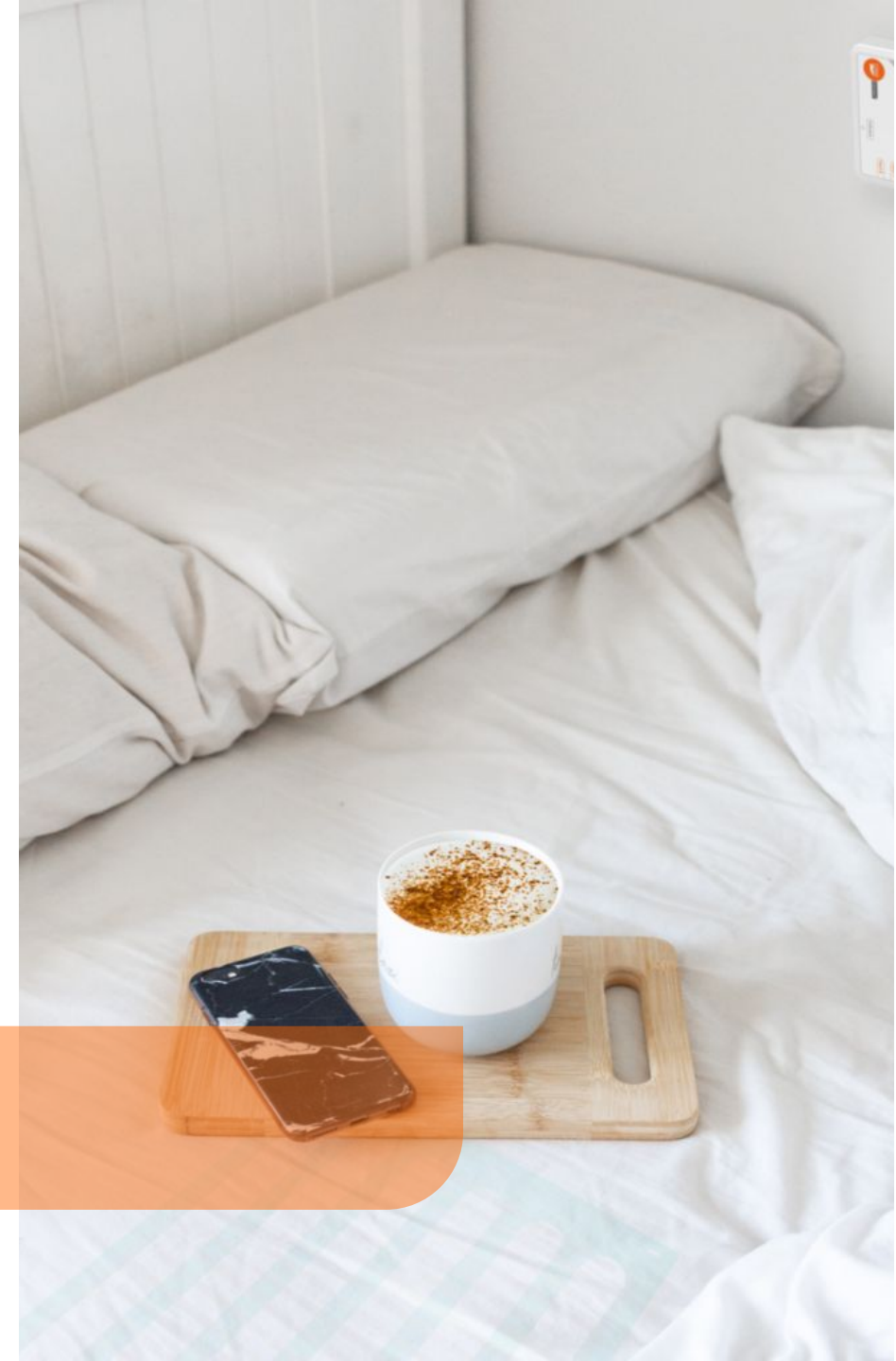


Connect

Oedi Absenoldeb

Mae'r oedi absenoldeb yn cael eu defnyddio ar gyfer moddau 1-4. Unwaith mae'r modd/opsiwn wedi eu dewis, trowch y deial i'r rhif dymunol sych yn cyd-fynd efo'r amser oedi sydd angen. Nid oes angen pwyso a gwasgu'r swîts mewnol wedyn. Dyma'r gosodiadau amser:

- 0 – 0.5 Eiliad
- 1 – 1 Eiliad
- 2 – 3 Eiliad
- 3 – 10 Eiliad
- 4 – 30 Eiliad
- 5 – 1 Munud
- 6 – 3 Munud
- 7 – 10 Munud
- 8 – 15 Munud
- 9 – 30 Munud

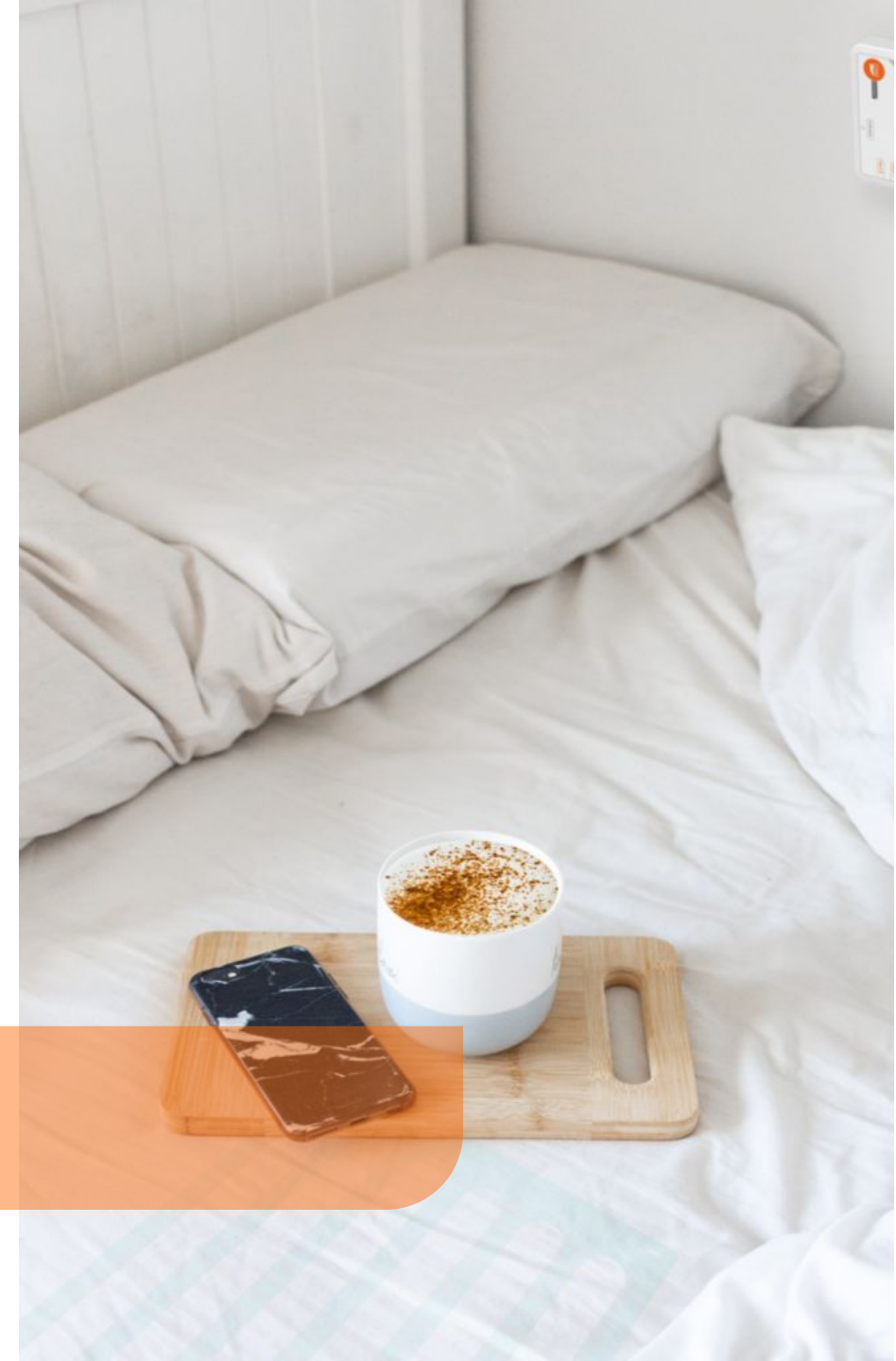


Technoleg Glyfar,
Gwnaethpwyd i Ofalu

Connect

Cysylltu'r Connect i'r Notifier / System Arall

- Rhagluniwch y Connect i'r modd a ddymunir (os ydych chi'n defnyddio moddau 1-4, gwnewch yn siŵr bod yr oedi absenoldeb wedi'i osod i'r nifer lleiaf)
- Paratowch yr Notifier / system arall wrth ei rhoi yn fodd cofrestru
- Actifadu'r Connect
- Dylai'r Notifier / system arall gydnabod y ddyfais newydd

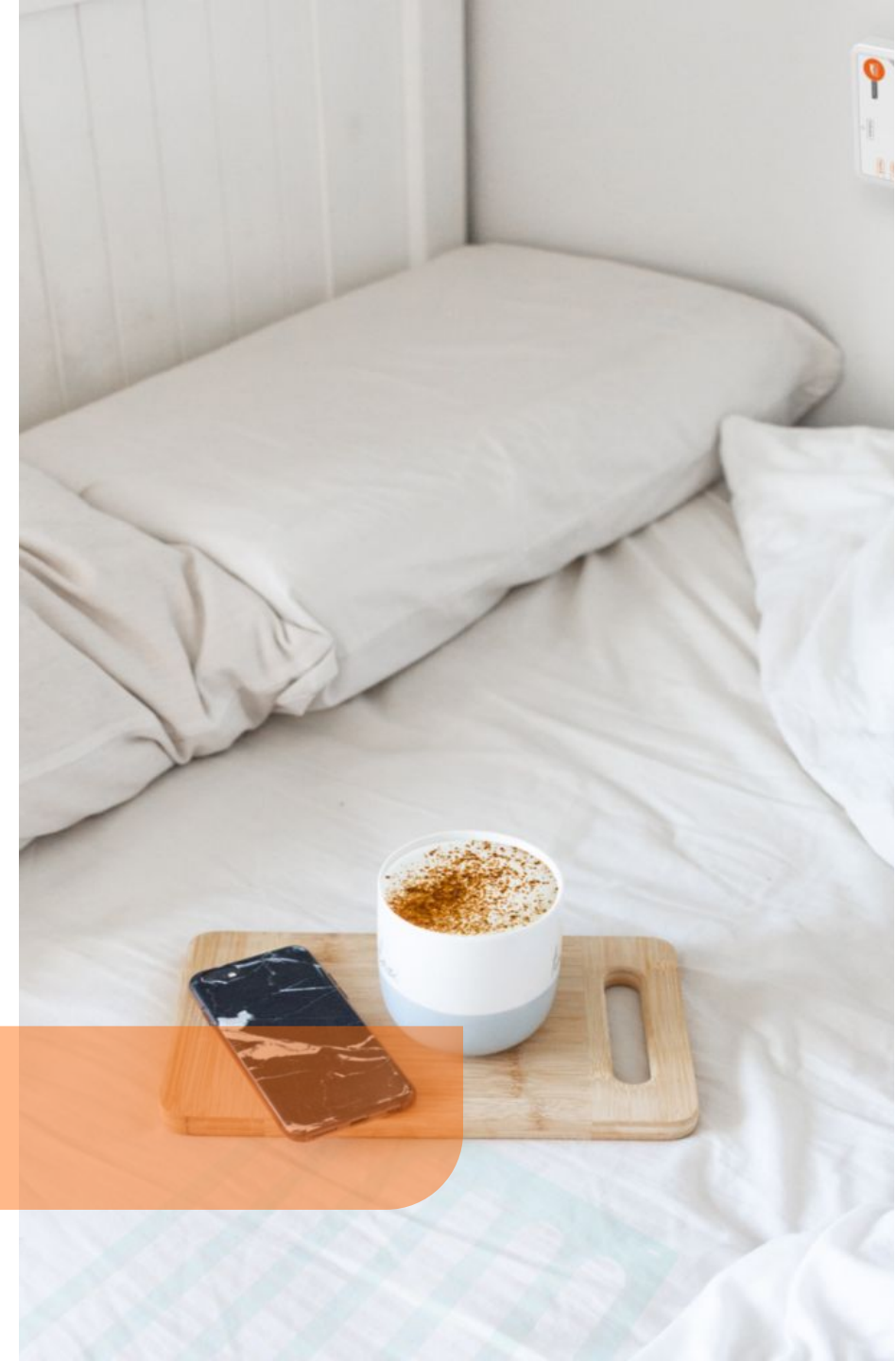

Diolch



Technoleg Glyfar,
Gwnaethpwyd i Ofalu

www.we-cair.com

01422 399155 | hello@we-cair.com